


## インストール手順 (Windows 8 / 7 / Vista)


- STEP1. Disk1を挿入すると下の図のような画面が表示され、「フォルダを…」をクリックする。




- STEP2. Diskの中身が下の図のように表示されるので、setup (setup.exe)を右クリックして「プロパティ」をクリック。

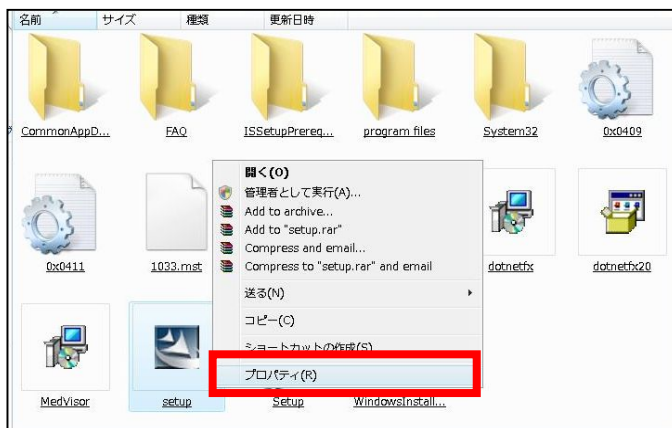

- STEP3. 「互換性」タブをクリックして(1. )、特権レベルを設定し(2. )、「適用」(3. )→「OK」(4. )の順番にクリックする。

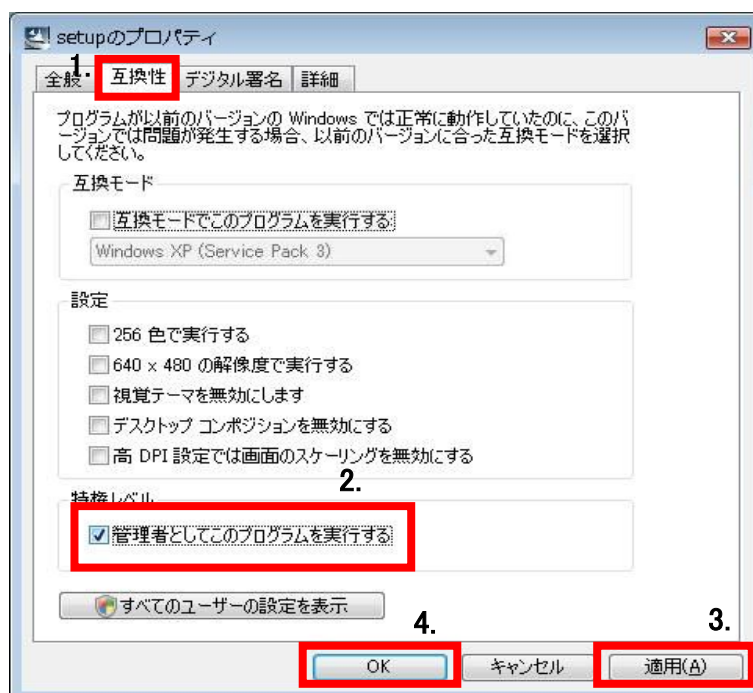


- STEP4. setup (setup.exe)をダブルクリックし、下の画面が表示されると、日本語を選択していることを確認し、「OK」をクリック。

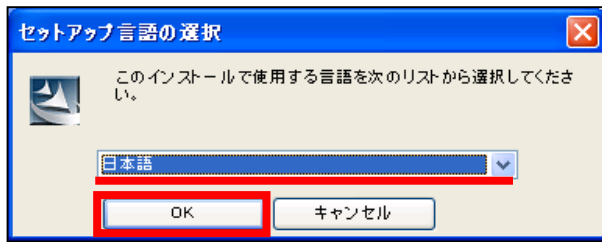

- STEP5. インストールする項目が表示されます。「Install」をクリックしてください。  
\* インストールされる項目はPC環境によって異なります。



\* Windows 8にインストールする際に以下のメッセージが表示された場合は、インターネット経由で.NET frameworkをダウンロード、インストールして下さい。

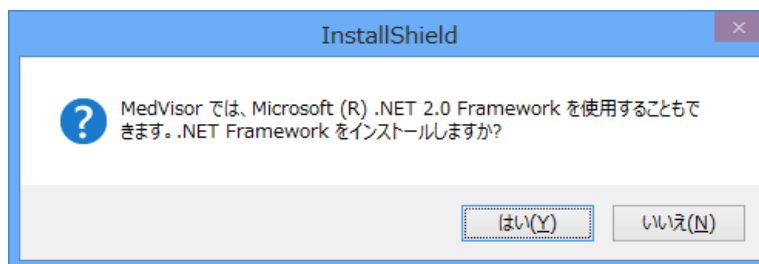


Windows 8の仕様により、インターネットに接続されていないと.NET frameworkをインストールすることができず、MedVisor Dental ver.2をインストールすることができません。


STEP6. [MedVisorDental ver.2のインストール]「次へ(N)」をクリックします。




STEP7. 使用許諾書に目を通していただき、よろしければ「使用許諾契約の条項に同意します(A)」を選択して「次へ(N)」をクリックします。

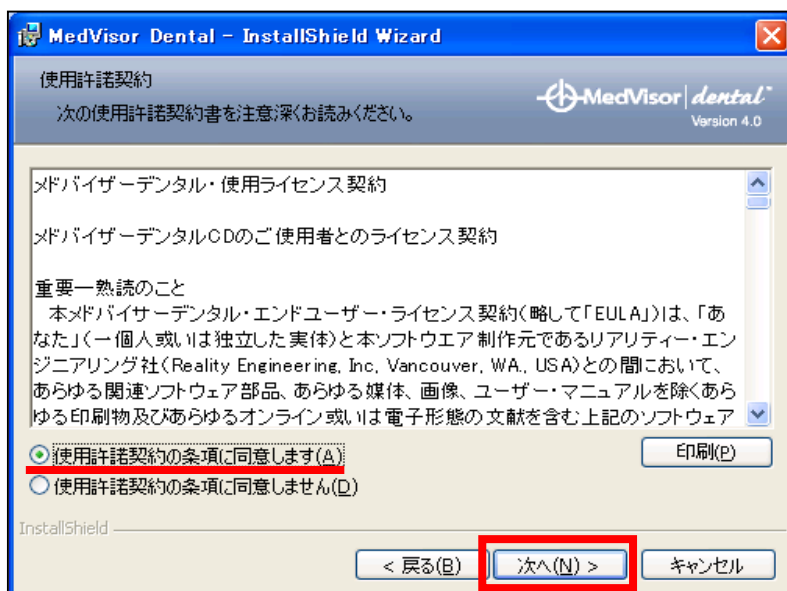


STEP8. ユーザー名、所属を入力します。「このコンピュータを使用するすべてのユーザ(A)」にチェックをつけて「次へ(N)」をクリックします。

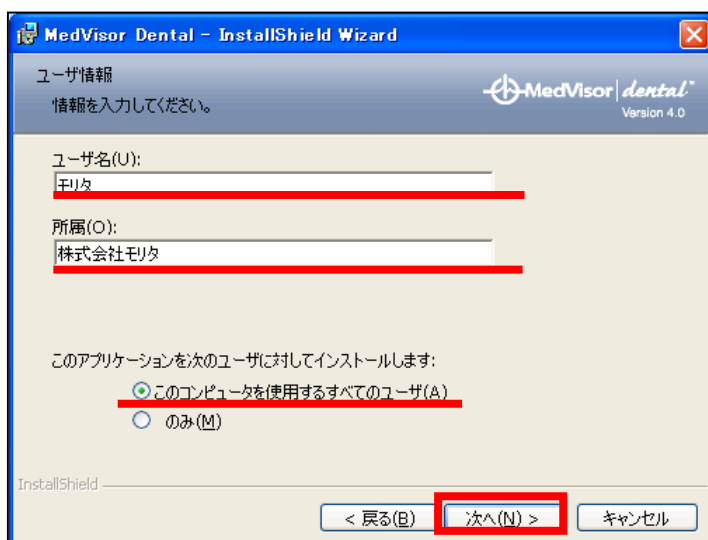

STEP9. 「インストール(I)」をクリックします。

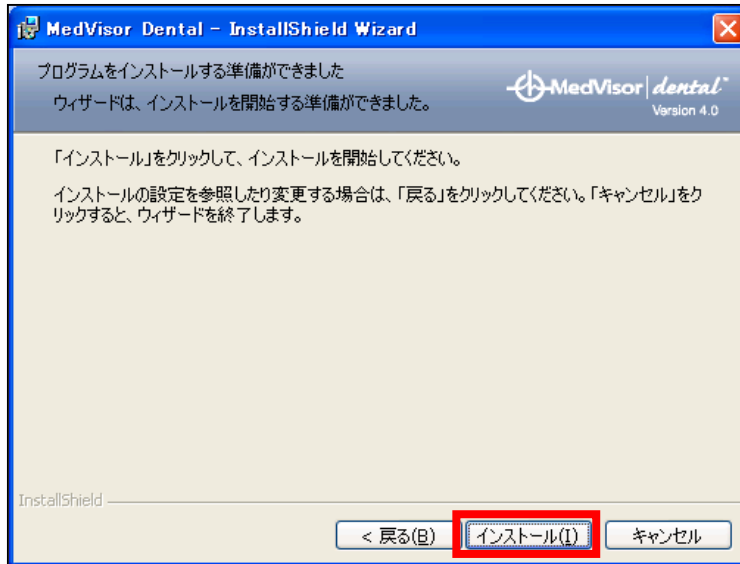


STEP10. インストール中の画面が表示されます。

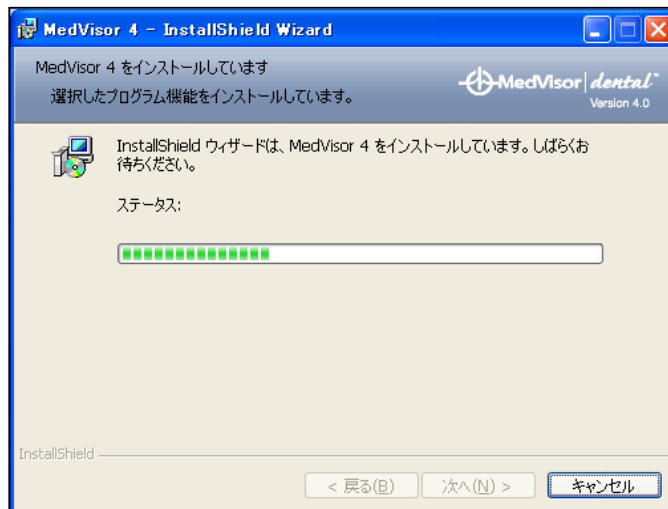

STEP11. 「ディスク2を挿入してください。」と表示された後、Disk1を取り出し、Disk2をセットして「OK」をクリックしてください。




STEP12. Disk2のインストールが始まります。

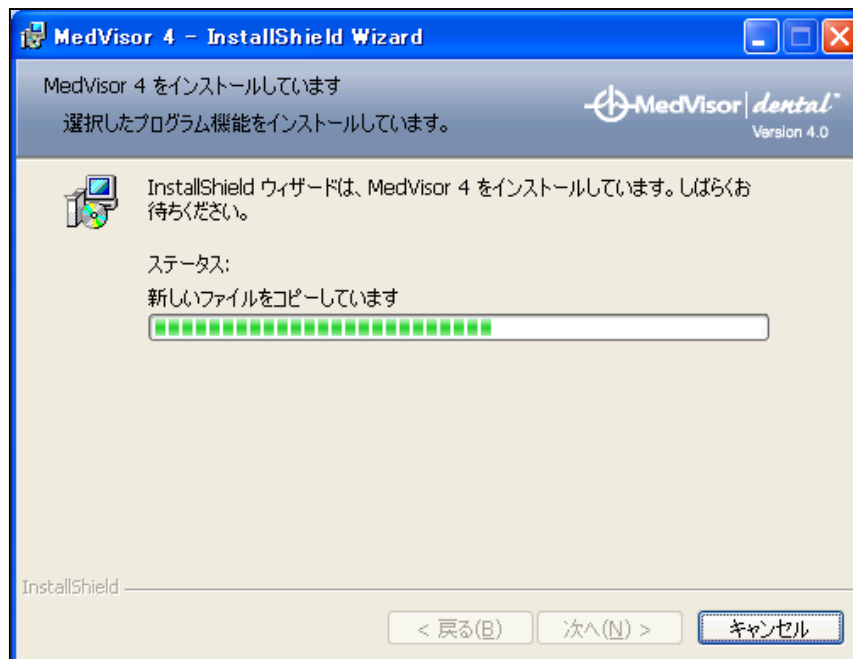


STEP13. インストールが完了しました。  
「完了」をクリックしてください。



STEP14. Disk1に入れ替え、CD内のファイルを表示します。

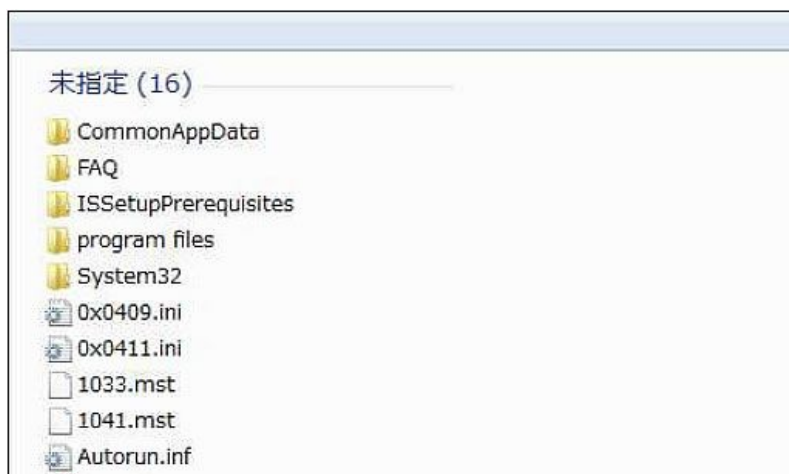


STEP15. ISSetupPrerequisitesというフォルダを開く。

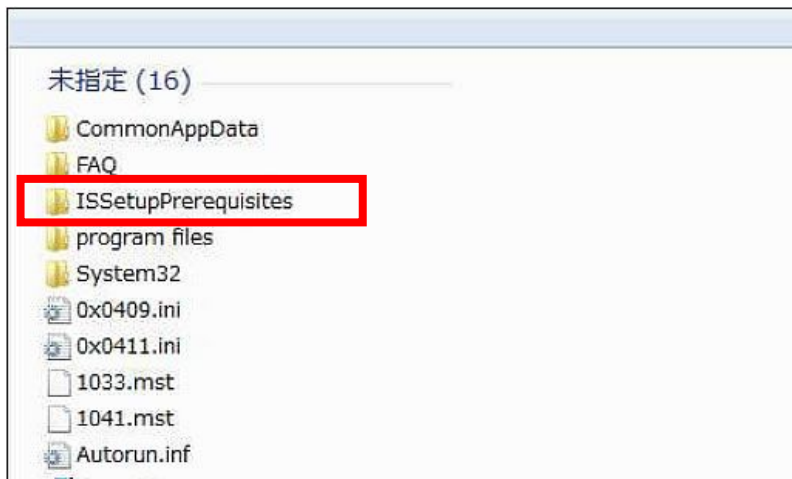

STEP16. QuickTime7.2というフォルダを開く。



STEP17. QuickTime7.2.0.240.msiをダブルクリックしてインストールする。

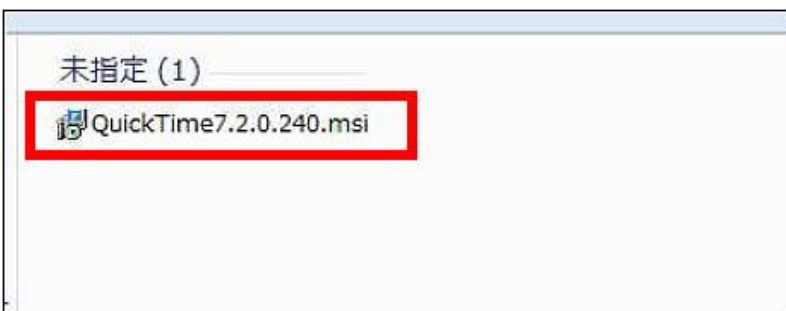

STEP18. インストールの最後で「購入しない」を選択すると完了。

