

Diagnostic and Imaging Equipment

Treatment Units

Handpieces and Instruments

Endodontic System

Laser Equipment

Laboratory Devices

Educational and Training Systems

Auxiliaries



モリタデジタルサポートセンター
受付時間 9:30~17:35
月曜日~金曜日(祝日・当社指定の休日を除く)
TEL 0800-333-4618 (無料)

携帯、IP電話やひかり電話などからは、つながらない場合がございます。その際には、お手数ですが下記までご連絡下さい。
TEL 06-7633-1983 (有料)

MedVisor Dental 総合サイト: <http://medvisor.dental-plaza.com>

ソフト開発

リアリティエンジニアリング(アメリカ)

発売

株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161

MedVisor dental G3

取扱説明書

Thinking ahead. Focused on life.

はじめに

この度は MedVisor dental G3 をご利用下さいまして、誠にありがとうございます。
本書ではインストールおよびアンロックの手順、日常行っていただく基本的な操作、
機能の説明をしております。本製品を使用いただく前に本書をよくお読み下さい。
またお読みになった後も、いつもお手元に置いてお使い下さい。
なお製品の改善のため、機能および操作を予告なく変更する場合がありますので、
ご了承下さい。

ソフトウェア・バージョン：MedVisor dental G3 Ver. 1.0

取扱説明書：第一版（2014 年 1 月）

商標











Microsoft、Windows、またはその他のマイクロソフト製品の名称および製品名は、
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他、本書に記載されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または
登録商標です。

目次

01 確認事項／サポート	P1
02 インストール手順	P3
03 アンロック手順	P13
04 アンインストール	P21
05 ボタンと画面の解説	P23
06 書き込み画像のエクスポート	P29
07 印刷	P31

01 確認事項／サポート

01.01 インストール前の確認事項

-  ご使用になる PC が動作環境を満たしていることをご確認ください。
-  動作環境を満たした PC であっても、ハードウェアの状態またはスペックにより正常に動作しない場合があります。
-  レセプトコンピュータ、画像診断などのソフトウェアの動作に影響を及ぼす恐れがあります。
-  今後リリースされる Windows の更新プログラムは本製品の動作に影響をおよぼす恐れがあります。
-  ウィルス対策ソフトにより本製品のインストールが正常に完了しなかった場合、そのウィルス対策ソフトのメーカーの指示に従い、本製品をインストールして下さい。
-  重要な歯科医院経営、診療、患者情報管理に関わるソフトをご使用の PC ではお使いにならないで下さい。
-  サーバへはインストールを行わないで下さい。
-  他社レセプトコンピュータ、画像診断ソフトウェアなどのネットワーク環境下でご使用の場合は、必ずメーカーへご確認の上、インストールして下さい。
-  承諾を受けずに本製品を複製、レンタル（有償、無償を問わず）することは、法律で禁止されています。
-  本製品のインストール用 DVD-ROM を家庭用 DVD プレイヤーで再生しないで下さい。

01.02 動作環境

動作環境	
OS	Windows 7 (32ビット/64ビット) Windows 8/8.1 (32ビット/64ビット)
CPU	Intel Celeron 1.8GHz 以上 (Intel Core i3 2GHz 以上推奨、Intel Atomは対象外)
メモリ	2GB以上 (4GB以上推奨)
ハードディスク	5GB以上の空き容量
画面解像度	1366 x 768以上を推奨

01.03 サポート

お客様からのご質問をお電話にて承っております。

モリタデジタルサポートセンター

お問合せ専用窓口

受付時間 9:30~17:35

月曜日~金曜日(祝日・当社指定の休日を除く)

TEL 0800-333-4618 (無料)

携帯、IP電話やひかり電話などからは、つながらない場合がございます。

その際には、お手数ですが下記までご連絡下さい。

TEL 06-7633-1983 (有料)


メドバイザーのウェブサイトで最新のサポート情報をご案内しております。

<http://medvisor.dental-plaza.com>


02 インストール手順




1. MedVisor dental G3のインストールディスクをPCに挿入し、「setup.exeの実行」をクリックします。

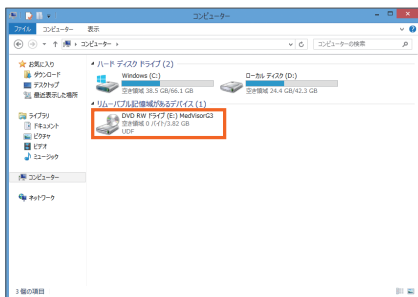


⚠ ディスクを PCに挿入しても何も表示されない場合は、エクスプローラーでコンピューターを表示し、挿入したディスクをダブルクリックしてインストールを開始させて下さい。

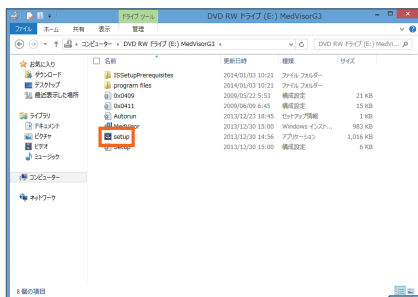


ディスクをダブルクリックした際にディスクの中身が表示された場合は、「setup」もしくは、「setup.exe」をダブルクリックしてインストールを開始させて下さい。

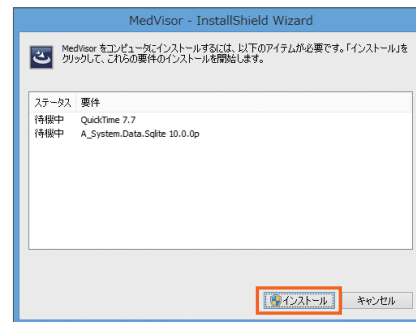


2. 「インストール」をクリックします。PCの環境により表示されるソフトは異なり、MedVisor dental G3を使用するために必要なソフトが全てインストール済みであればこの画面は表示されません。

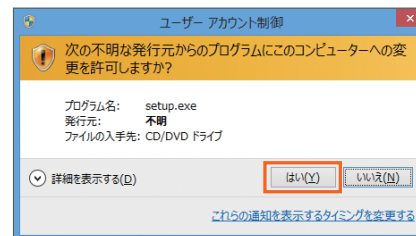

⚠ 「インストール」をクリックした後に、ユーザーアカウント制御のウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。以後、同じウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックして下さい。

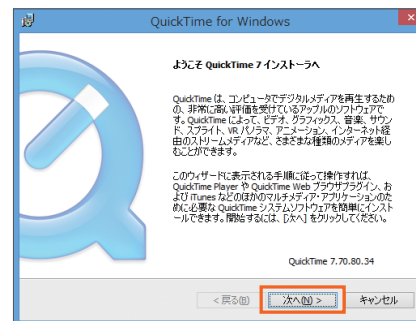


⚠ 1. QuickTimeのインストールが開始された場合は、「次へ」をクリックします。

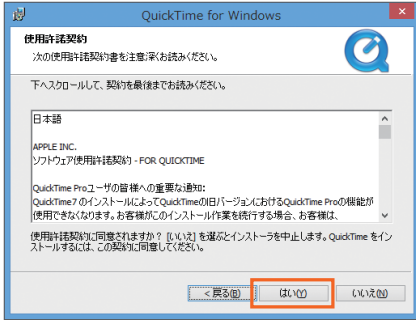


2.「はい」をクリックします。




5.「購入しない」をクリックすると、自動的に次の画面が表示されます。

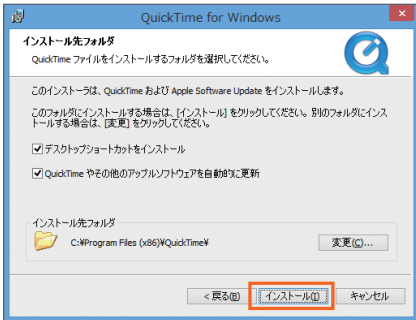


3.「インストール」をクリックし、インストールが完了するまで待ちます。

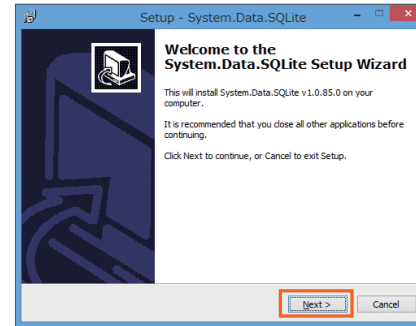


1.「System.Data.SQLite」のインストールが開始された場合は、「Next」をクリックします。

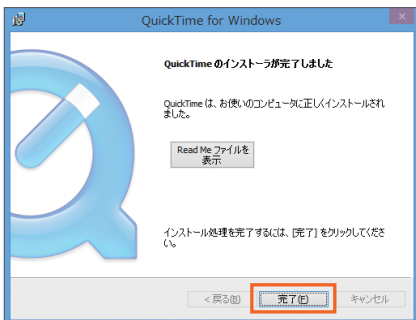


4.「完了」をクリックします。

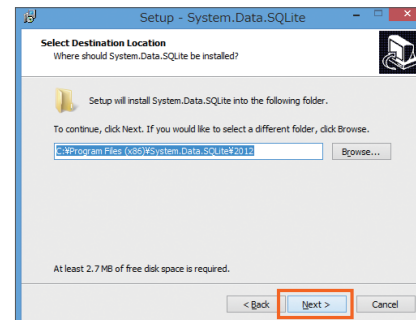


2.「Next」をクリックします。

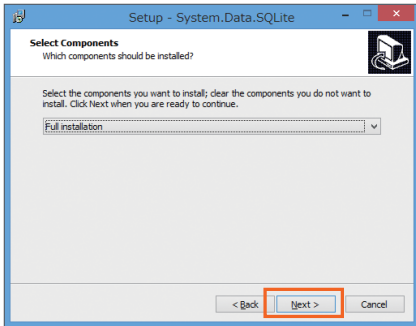


3.「Next」をクリックします。

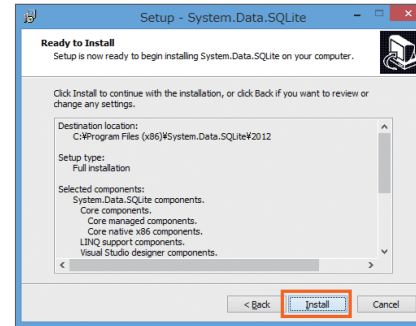


6.「Install」をクリックします。

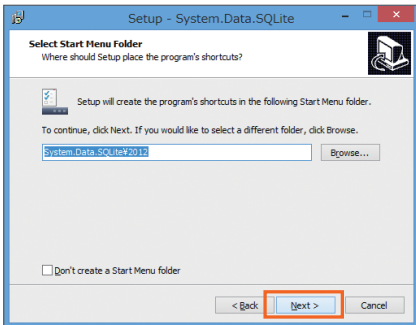


4.「Next」をクリックします。

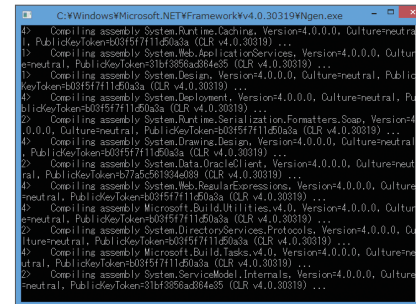


7.黒い背景の画面が表示されますが、何もせず次の画面が表示されるまで待ちます。

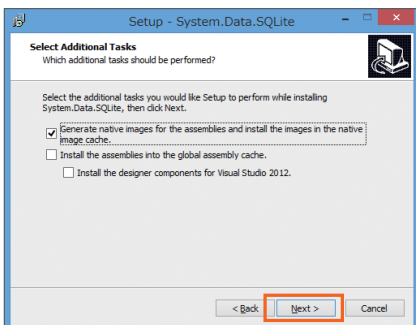


5.「Next」をクリックします。

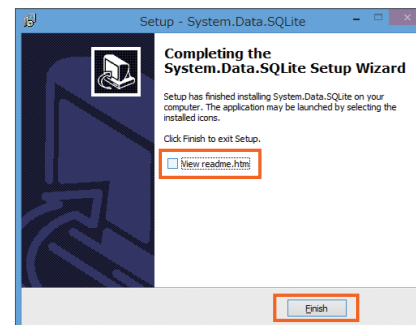


8.「View readme.htm」のチェックを外し、「Finish」をクリックすると、自動的に次の画面が表示されます。

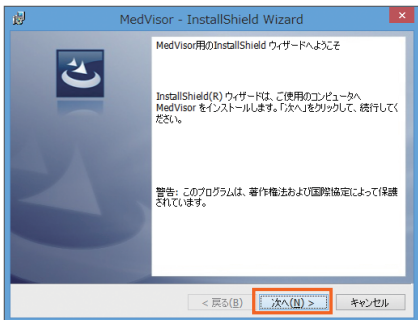


3. MedVisorのインストールウィンドウが表示されたら、「次へ」をクリックします。

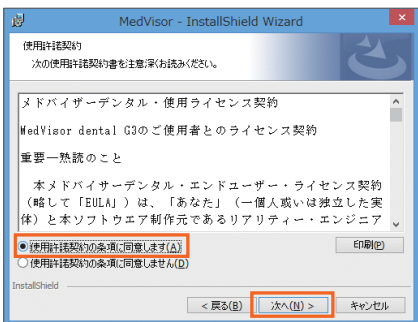


4. 「使用許諾契約の条項に同意します」をクリックし、「次へ」をクリックします。

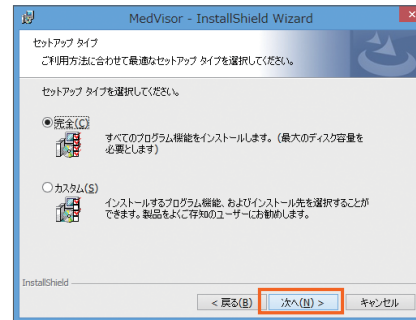


6. 「次へ」をクリックします。

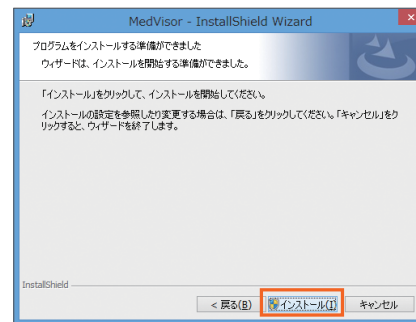


7. 「インストール」をクリックします。

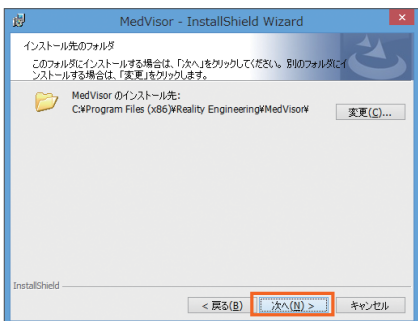


5. 「次へ」をクリックします。

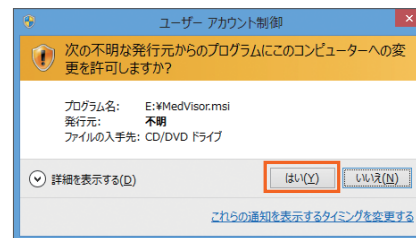


「インストール」をクリックした後に、ユーザーアカウント制御のウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックします。以後、同じウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックして下さい。

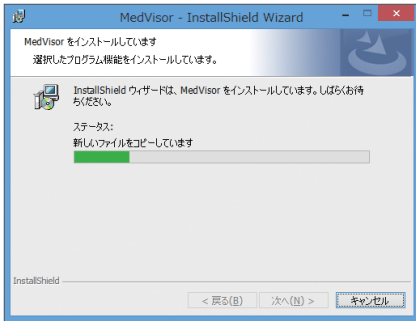


8. インストールが開始されますが、約 4GB のファイル容量となるため、インストールに 20 分以上時間が掛かる場合があります。しばらくお待ち下さい。

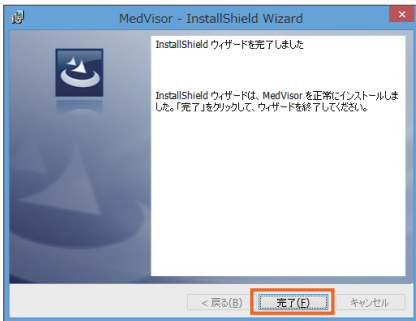


9. 「完了」をクリックすると、インストールが完了します。

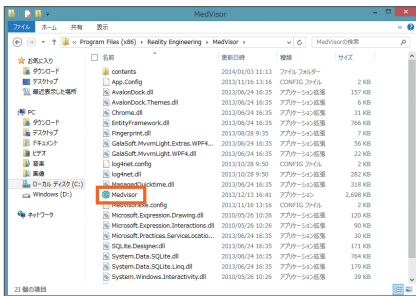


インストール後にデスクトップ上に MedVisor のショートカットが作成されない場合は、
「C:\Program Files (x86)\Reality Engineering\MedVisor」(64bit)、
「C:\Program Files\Reality Engineering\MedVisor」(32bit) のフォルダ内の「MedVisor」、もしくは「MedVisor.exe」へのショートカットを作成し、お好きな場所にショートカットを移動して下さい。

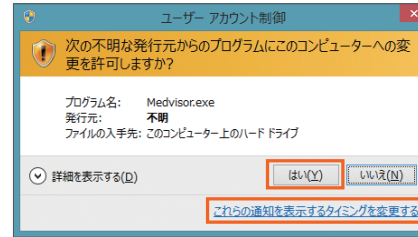


MedVisor dental G3 を起動する際にユーザーアカウント制御のウィンドウが表示された場合は、「はい」をクリックして下さい。「これらの通知を表示するタイミングを変更する」をクリックし、次に表示される画面で一番下の「通知しない」までバーを下げ「OK」をクリックすると、ユーザーアカウント制御のウィンドウが表示されなくなります。

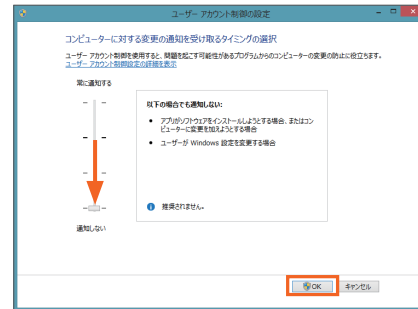

03 アンロック手順

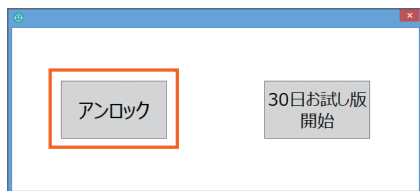



1. MedVisor dental G3を起動し、「アンロック」をクリックします。「30日お試し版開始」をクリックすると、30日間のお試し版でご利用頂くことができます。

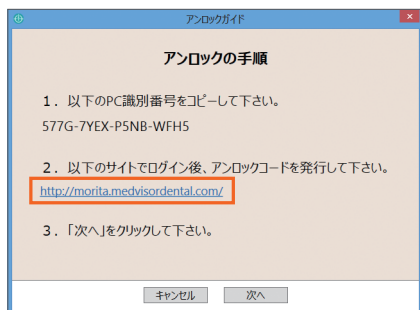


2. MedVisor dental G3をインストールしているPCがインターネットに接続されている場合は、2番のリンクをクリックします。インターネットに接続されていない場合は、別のインターネットに接続されている端末(PC、スマホ、タブレット)でサイトを開きます。
<http://morita.medvisordental.com/>



3. MedVisor dentalのアカウントを登録済みの方は右上の「ログイン」、未登録の方は「アカウント登録」をクリックします。

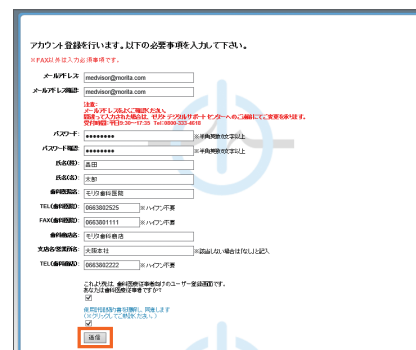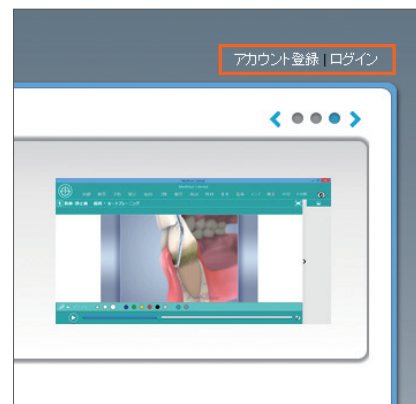


1. 「アカウント登録」をクリックした場合は、必要事項を入力し「送信」をクリックします。

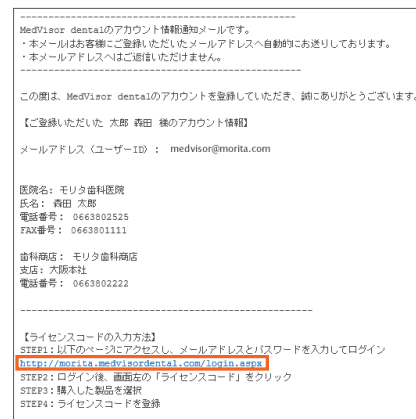


2. 「送信」をクリックした後に届く「アカウント情報登録通知メール」内のSTEP1のリンクをクリックすると、ログインページが表示されます。同時に届く「アカウント仮登録 Eメール」内のリンクもクリックし、メールが問題なく届いたことをお知らせ下さい。




3. MedVisor dentalのアカウントに登録済みのメールアドレス、パスワードを入力し「ログイン」をクリックします。

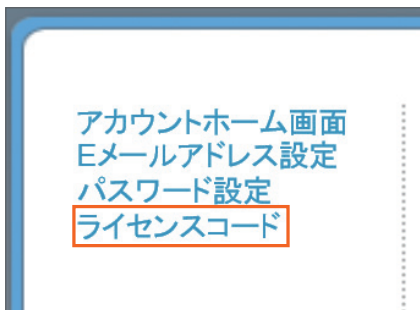

4. ログイン後の画面左上に表示される「ライセンスコード」をクリックします。

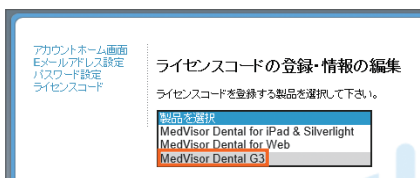

5. 「MedVisor Dental G3」を選択します。

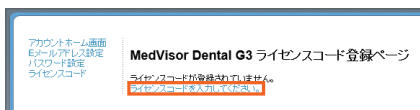


6. 「ライセンスコードを入力して下さい。」をクリックします。



7. 購入された製品のライセンスコードを入力し、「セーブ」をクリックするとライセンスコードが登録されます。




MedVisor dentalのアカウントに何もライセンスが登録されていない状態でアップグレードライセンスを入力すると、ユーザー番号と電話番号を入力する画面が表示されます。メドバイザーデンタル ver.1、ver.2のユーザー番号と歯科医院様の電話番号を入力し、「保存」をクリックするとライセンスコードが登録されます。

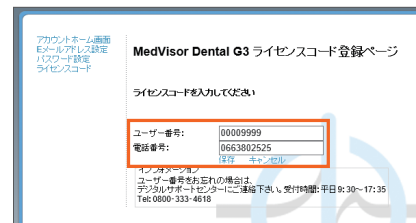


ユーザー番号をお忘れになったり、電話番号が登録当時から変更になった場合は、デジタルサポートセンター(Tel: 0800-333-4618)にご連絡下さい。

MedVisor dental for iPad & Silverlight、もしくはfor Webのライセンスがアカウントに登録されている場合は、この画面は表示されません。

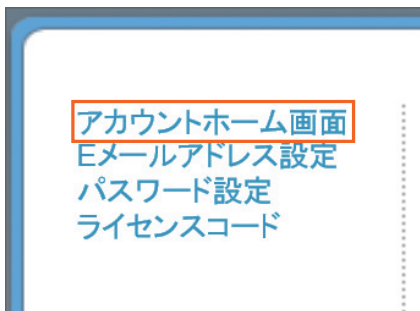


8. ライセンスコードの登録後に「アカウントホーム画面」をクリックします。

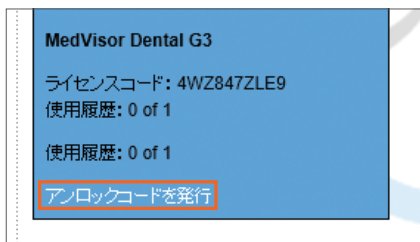


9. 「アンロックコードを発行」をクリックします。




10. 「PC識別番号を入力」横のボックスに 2番目の手順、「アンロックの手順」の画面で表示されていた PC 識別番号を入力し、「発行」をクリックします。ハイフンも含めて、表示されたままの PC 識別番号を入力して下さい。誤って入力された場合は、デジタルサポートセンター (Tel: 0800-333-4618) にご連絡下さい。

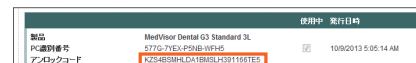


11. アンロックコードが発行されます。以上でウェブサイト上での作業は終了です。

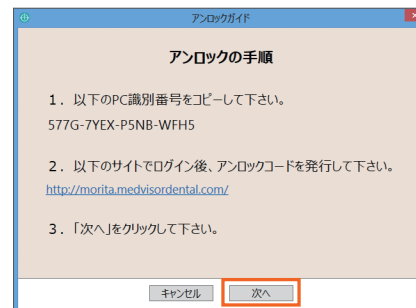

12. MedVisor dental G3の画面に戻り「次へ」をクリックします。

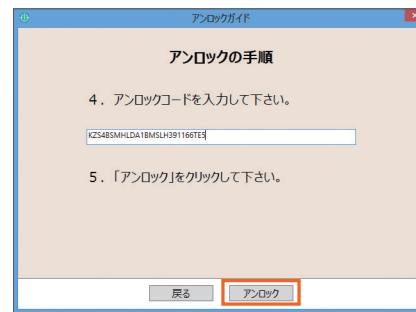

13. 11番目の手順で発行したアンロックコードを入力し、「アンロック」をクリックします。大文字、小文字など表示されたままのアンロックコードを入力して下さい。

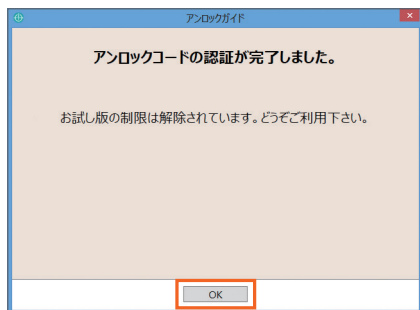

14. アンロックコードの認証が完了します。「OK」をクリックすると、すぐにご利用頂けます。




15. ホーム画面が表示されますので、どうぞご利用下さい。


04 アンインストール




1.コントロールパネルを開き、「プログラムのアンインストール」をクリックします。

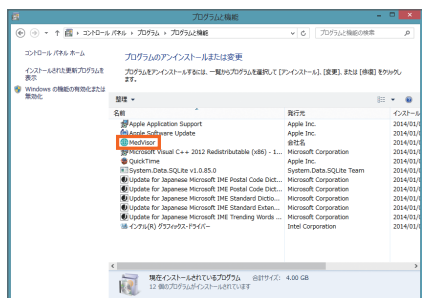


2.「MedVisor」をダブルクリックし、アンインストールします。

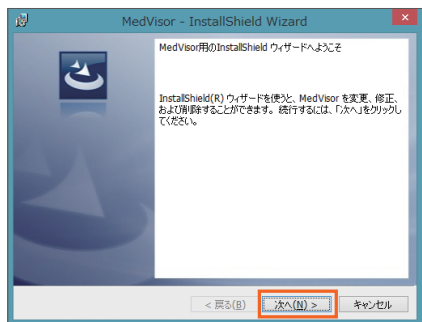

❗
1.「プログラムのアンインストール」が表示されない場合は、MedVisor dental G3のインストールディスクをPCに挿入し、「次へ」をクリックします。

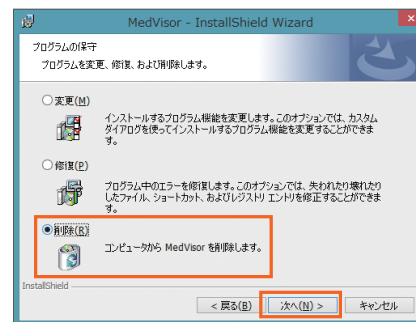

2.「削除」を選択し、「次へ」をクリックします。

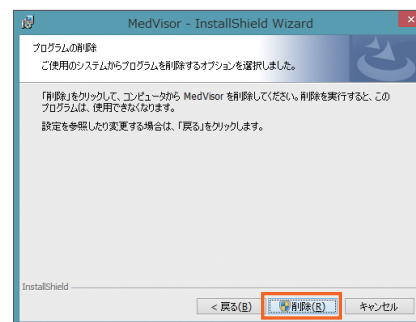

3.「削除」をクリックすると、アンインストールが開始されます。


05 ボタンと画面の解説

05.01 ホーム画面




ホーム画面	
ホームボタン	ホームボタンメニューを表示します。
パンくずリスト	表示中の画面の場所を表示します。表示されている名称をクリックすると、クリックしたフォルダに移動します。
一つ上へ	一つ上のフォルダに移動します。
トップメニュー	診療分野ごとの動画・静止画のカテゴリが常に表示されます。表示されている名称をクリックすると、クリックしたカテゴリ内のコンテンツを表示します。
臨床写真	臨床写真のホーム画面を開きます。
動画・静止画カテゴリ（フォルダ）	表示されているアイコンをダブルクリックすると、カテゴリ内のコンテンツが表示されます。

05.02 ホームボタンメニュー

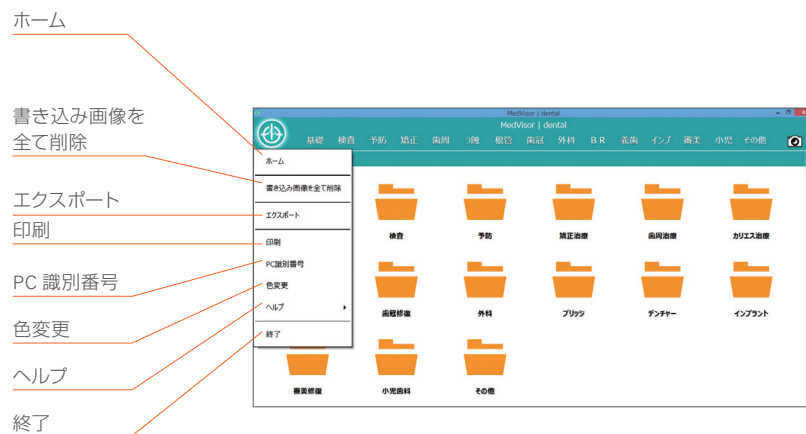

ホームボタンメニュー	
ホーム	ホーム画面に戻ります。
書き込み画像を全て削除	サムネイルトレイ上の書き込み画像を全て削除します。
エクスポート	書き込み画像をエクスポートする画面を表示します。
印刷	書き込み画像を印刷する画面を表示します。
PC識別番号	アンロックコードを発行したPCの識別番号を表示します。
色変更	トップメニューやコントロールパネルの背景色を変更する画面を表示します。
ヘルプ	サポート情報とバージョン情報を表示します。
終了	メドバイザーを終了します。

05.03 描画ツール

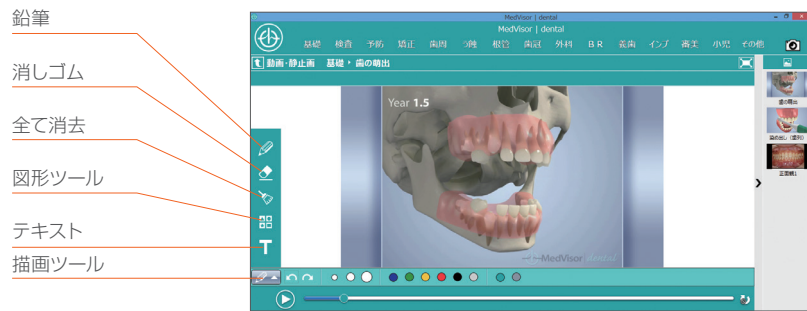

描画ツール

鉛筆	一時停止した動画、静止画に線を書き込みます。
消しゴム	書き込んだ線を消去します。
全て消去	書き込んだ線を一度で全て消去します。
図形ツール	→(矢印)、○(丸)、×(バツ)の図形ツールで、一時停止した動画、静止画に書き込みます。
テキスト	任意の文字を一時停止した動画、静止画に入力します。
描画ツール	描画ツールバーを表示します。

05.04 動画再生画面


オpaque (不透明)
セミ・トランスピアレント (半透明)



動画再生画面

オpaque (不透明) セミトランスピアレント (半透明)	書き込み線のオpaque、セミトランスピアレントの切り替えをします。
色選択	書き込み線の色(青、緑、黄、赤、黒)を変更します。
サイズ選択	書き込み線の太さ(細、中、太)を変更します。
戻る、進む	書き込み状態を一段階戻し(戻る)、戻した状態を一段階進めます(進む)。
再生/一時停止	動画の再生、一時停止をします。
全画面表示	表示されているコンテンツを全画面で表示します。
サムネイルトレイ	書き込みをした画像が自動的に一時保存されます。一時保存された画像の上で右クリックをすると、「エクスポート」、「削除」、「全て削除」を選択できます。
スクラブバー	再生している間右側へ自動的に進みます。左側に動かすと巻き戻し、右側に動かすと早送りができます。
リピート設定	リピート再生のON、OFFを切り替えます。

05.05 臨床写真、静止画表示画面

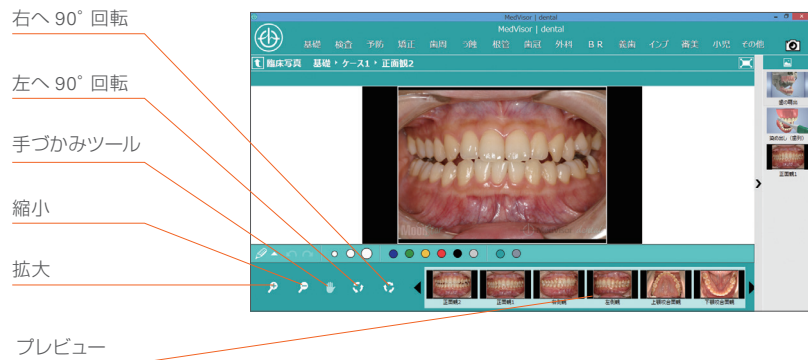

臨床写真、静止画表示画面

右へ90°回転	表示中の画像を右へ90°回転します。
左へ90°回転	表示中の画像を左へ90°回転します。
手づかみツール	表示中の画像を任意の位置へ移動します。
縮小	表示中の画像を縮小して表示します。
拡大	表示中の画像を拡大して表示します。
プレビュー	同じフォルダに保存されている画像を一覧で表示します。左右の矢印をクリックすると、表示される画像が切り替わります。

06 書き込み画像のエクスポート


サムネイルレイに一時保存された画像をエクスポートすることができます。



1. ホームボタンをクリックし「エクスポート」をクリックします。



2. エクスポートする画像を選択し、「参照」をクリックします。

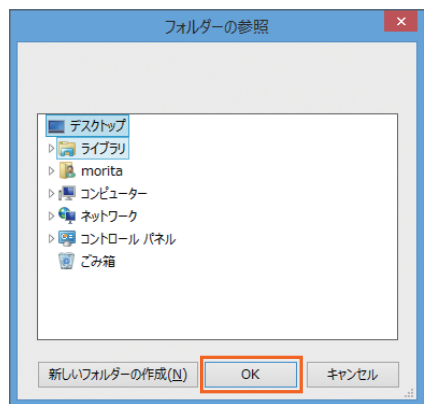

3. 保存場所を選択し「OK」をクリックします。



4. 「エクスポート」をクリックすると、選択した保存場所に画像がエクスポートされます。



! 「DOORへエクスポート」を選択すると自動的にフォルダ名と保存場所が入力され「エクスポート」をクリックするだけで、画像をエクスポートすることができます。i-VIEW、TrinityCoreでスムーズに画像をインポートすることができます。



! 「選択した画像を保存するフォルダを作成」をクリックした後にフォルダ名を入力し、保存場所を選択した後に「エクスポート」をクリックすると、作成したフォルダの中に画像をまとめて画像をエクスポートすることができます。

07 印刷

サムネイルトレイに一時保存された画像を印刷し、患者さんにお渡しすることができます。



1. ホームボタンをクリックし「印刷」をクリックします。




2. 印刷する画像を選択し、ページレイアウトを選択します。



文字入力ができるページレイアウトを選択した場合、文字入力のフィールドがページレイアウトの下に追加されます。左右の矢印をクリックすると、文字を入力する画像を切り替えることができます。



3. 文書名、患者名、医院名を入力し、「印刷」をクリックした後に、プリンタを選択し印刷します。

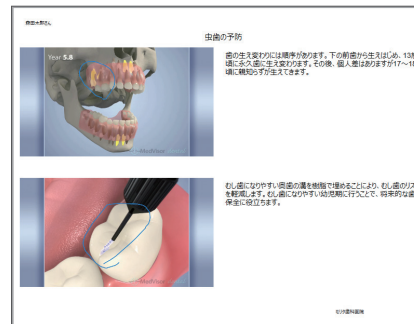

このように印刷され、患者さんにお渡しすることができます。